

snogg®

ANIMAL CARE



Animal WOUND CARE

ETT SÅRVÅRDSKONCEPT FÖR DJUR



snögg®

ANIMAL CARE

- ✓ Lätt att applicera och ta bort, utan onödigt obehag för djuret
- ✓ Kan användas på svårhanterliga områden på djurets kropp
- ✓ Mångsidig användning
– kombinera och anpassa för alla djurtyper och stadier i sår-läkningsprocessen
- ✓ För behandling och stöd
- ✓ Förpackningsdesign med tydliga instruktioner



Sårvård för djur sedan 1980

Snögg Animal Care har mer än 40 års erfarenhet av sårvård för djur. Produkterna är avsedda för användning på djur – med fokus på djurens välbefinnande. Utvecklat i samarbete med veterinärer och experter på sårvård för djur. Produktsortimentet omfattar olika typer av förband som enkelt kan anpassas efter olika behov och områden på kroppen, vilket ger användaren kreativ frihet.

Adhesive FOAM BANDAGE

LATEX-
FRI

NÄR DU BEHÖVER BRA FÄSTE PÅ PÄLS

- Fäster på ena sidan
- Idealiskt för vaddering och fixering
- Mjukt och flexibelt




REF 510002410
(Tidigare Animal Polster)
9 x 200 cm


REF 510002412
(Tidigare Animal Polster)
14 x 200 cm

REF 510002413
(Tidigare Animal Polster)
22 x 200 cm


Lägga sårförband:

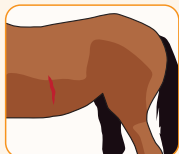

Se till att såret är rent och att pälsen är torr.

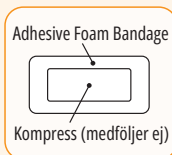

Använd en kompress för att skydda såret.

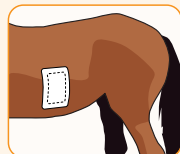

Fixera kompressen med Adhesive Foam Bandage.



Skanna QR-koden för fler instruktioner.

Adhesive Foam Bandage REMOVAL WIPES

SKONSAMMARE BORTTAGNING AV ADHESIVE FOAM BANDAGES

- Underlättar borttagning
- Enkel och effektiv användning
- Alkoholfri formel



REF 510002378
30 servetter (12 x 18 cm)

Thick & Thin FOAM BANDAGE

LATEX-
FRI

FÖR FLEXIBILITET OCH RÖRELSEFRIHET

- Självhäftande
- Kan placeras direkt på såret
- Absorberande, mjukt och flexibelt



REF 510002411
(Tidigare Animal Vet)
9 x 200 cm



REF 510002379
(Tidigare Animal Soft)
6 x 450 cm

Tassbandage:




Linda en bit av Thick eller Thin Foam Bandage runt benet.



Riv av en lämplig längd så att den passar mellan tårna. Fäst till omslaget och vrid 180 grader.



Placera den smala delen mellan tårna och fäst bandaget på andra sidan. Upprepa för varje tå.

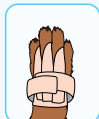

Avsluta genom att linda ett andra bandage runt benet för att säkra förbandet.



Skanna QR-koden för fler instruktioner.

Flex WRAP BANDAGE

ETT YTTRE SKYDDANDE FÖRBAND

- Snabbt och enkelt att applicera och avlägsna
- Självhäftande
- Skyddar från smuts och fukt



REF 510002414
5 x 450 cm

REF 510002393
10 x 450 cm



Underlätta
borttagning av
Adhesive Foam
Bandage med
**REMOVAL
WIPES**



ÖVERSIKT

	ADHESIVE FOAM BANDAGE	THICK FOAM BANDAGE	THIN FOAM BANDAGE	FLEX WRAP BANDAGE
Självhäftande – fastnar inte i päls, hud eller sår	✗	✓	✓	✓
Bra fästförmåga på päls och hud	✓	✗	✗	✗
Tvårelastisk	✓	✓	✓	✗
Längdelastisk	✗	✓	✓	✓
Absorberande	✗	✓	✓	✗
Stoppar blödning	✗	✓	✓	✗
Vidhäftande även när det är vått	✗	✓	✓	✗
Lämpligt som första lager	✗	✓	✓	✗
Lämpligt som andra lager	✓	✓	✓	✓
Lämpligt som tredje lager	✓	✗	✗	✓
Fixering	✓	✓	✓	✓
Tjocklek	5 mm	5 mm	1,9 mm	

Primärförband

Snögg Animal Care erbjuder tre sorters förband för olika typer av sår, inklusive små sår, kraftigt vätskande sår och sår med infektionsrisk. De tre primärförbanden fixeras lämpligen med *Adhesive Foam Bandage*.

Foam COMPRESS



FRÄMJAR SÅRLÄKNING

- Steril och absorberande
- Skapar fuktig sårläkning
- Mjuk och flexibel



REF 510003122
10 st (10 x 10 cm)

REF 510003123
10 st (5 x 5 cm)

Superabsorbent COMPRESS



FÖR KRAFTIGT VÄTSKANDE SÅR

- Steril
- Hög absorptionsförmåga
- Hjälper till att förhindra läckage



REF 510003124
10 st (10x10 cm)

REF 510003125
10 st (10 x 20 cm)


BactiDefend DRESSING

MINSKAR BIOBÖRDAN MED UPP TILL 99%

- Med peptider som efterliknar immunförsvaret
- Binder och förstör bakterier
- Främjar sårhäkning



REF 510003786
5 st (4,5 x 15 cm)

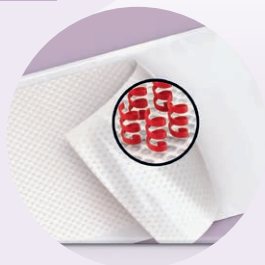

ÖVERSIKT

	BACTIDEFEND DRESSING	FOAM COMPRESS	SUPERABSORBENT COMPRESS
Lågt vätskande sår	✓	✓	✗
Medelvätskande sår	✗	✓	✓
Kraftigt vätskande sår	✗	✗	✓
Sår med infektionsrisk	✓	✗	✗
Kirurgiska sår	✓	✓	✓
Binder och förstör bakterier	✓	✗	✗
Fuktig sårhäkning	✓	✓	✗
Steril	✓	✓	✓
Kan klippas till önskad storlek	✓	✓	✗
Lämplig att fixera med Adhesive Foam Bandage	✓	✓	✓

snogg[®]

ANIMAL CARE

www.snogg.com

Orkla Wound Care AB (Svetsarvägen 15),
Box 1336, SE-171 26 Solna, Sverige
Tel +46 (0)8 590 96325,
snogganimal@orkla.com



620001320 V.01 2026, SE