

**snogg®**

ANIMAL CARE



# Animal WOUND CARE

EIN KONZEPT ZUR WUNDVERSORGUNG VON TIEREN



**snögg**

ANIMAL CARE

- ✓ Leicht zu befestigen und zu entfernen – sehr schonend und stressfrei für die Tiere
- ✓ Eignet sich auch an schwierig zu verbindenden Stellen am Tier
- ✓ Vielseitig verwendbar – für alle Tierarten und Phasen des Wundheilungsprozess kombinierbar und anpassbar
- ✓ Lässt sich leicht mit anderen Maßnahmen zur Wundversorgung kombinieren
- ✓ Zur Behandlung und Unterstützung
- ✓ Verpackungsdesign mit klarer Anleitung



## Wundversorgung für Tiere seit 1980

**Snögg Animal Care** hat mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Wundversorgung für Tiere. Die Produkte wurden in Zusammenarbeit mit Tierärzten und Experten für Wunden bei Tieren entwickelt und sind speziell für die Anwendung bei Tieren ausgelegt – damit es unseren Tieren rundum gut geht! Das Produktsortiment umfasst verschiedene Verbandtypen, die sich leicht an unterschiedliche Bedürfnisse und Körperteile anpassen lassen und so kreative Freiheit bei der Anwendung bieten.

# Adhesive FOAM BANDAGE

LATEX-  
FREI

## WENN HERVORRAGENDE HAFTUNG AM FELL GEFRAGT IST.

- Klebeschicht an einer Seite
- Ideal zur Polsterung und Fixierung
- Weich und flexibel



REF 510002410

(Ehemals: Animal Polster)  
9 x 200 cm


REF 510002412

(Ehemals: Animal Polster)  
14 x 200 cm


REF 510002413

(Ehemals: Animal Polster)  
22 x 200 cm


## Wunden verbinden:

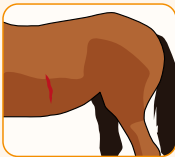

Darauf achten, dass die Wunden  
sauber sind und das Fell trocken ist.

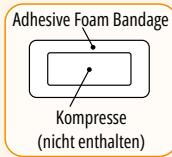

Eine Komresse (nicht enthalten)  
zum Schutz der Wunde verwenden.

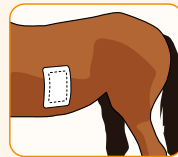

Die Komresse mit Adhesive  
Foam Bandage fixieren.



Scannen Sie den QR-Code, um die  
vollständige Anleitung zu erhalten.

# Adhesive Foam Bandage REMOVAL WIPES

## SANFTE ENTFERNUNG VON ADHESIVE FOAM BANDAGES:

- Einfache Entfernung
- Leichte, wirksame Anwendung
- Alkoholfreie Formel



REF 510002378

30 Tücher (12 x 18 cm)

# — Thick & Thin — FOAM BANDAGE

LATEX-FREI

## FÜR FLEXIBILITÄT UND BEWEGUNGSFREIHEIT

- Haftet nur an sich selbst
- Kann direkt auf der Wunde verwendet werden
- Saugfähig, weich und flexibel




**REF 510002411**  
(Ehemals: Animal Vet)  
9 x 200 cm



**REF 510002379**  
(Ehemals: Animal Soft)  
6 x 450 cm


### Pfoten verbinden:

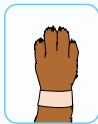


Ein Stück Thick oder Thin Foam Bandage um die Pfote wickeln.



Ein weiteres Stück in einer passenden Länge bis zu den Krallen abreißen. An dem gewickelten Stück befestigen und um 180° drehen.

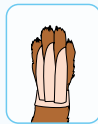

Die Engstelle zwischen die Krallen schieben und den Verband an der anderen Seite fixieren. An allen Krallen wiederholen.

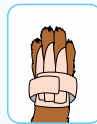

Abschließend einen zweiten Verband zur Fixierung um die Pfote wickeln.



Scannen Sie den QR-Code, um die vollständige Anleitung zu erhalten.

# — Flex — WRAP BANDAGE

## ÄUSSERER FIXIERVERBAND

- Leichtes Befestigen und Entfernen
- Haftet an sich selbst
- Schützt vor Schmutz und Feuchtigkeit



**REF 510002414**  
5 x 450 cm

**REF 510002393**  
10 x 450 cm





Einfache  
Entfernung der  
Adhesive Foam  
Bandage mit  
**REMOVAL  
WIPES**



ÜBERSICHT	ADHESIVE FOAM BANDAGE	THICK FOAM BANDAGE	THIN FOAM BANDAGE	FLEX WRAP BANDAGE
Haftet an sich selbst – nicht an Fell, Haut oder Wunden	✗	✓	✓	✓
Perfekte Haftung an Fell & Haut	✓	✗	✗	✗
Querelastisch	✓	✓	✓	✗
Längselastisch	✗	✓	✓	✓
Saugfähig	✗	✓	✓	✗
Stillt die Blutung	✗	✓	✓	✗
Klebt auch nass	✗	✓	✓	✗
Geeignet als erste Schicht	✗	✓	✓	✗
Geeignet als zweite Schicht	✓	✓	✓	✓
Geeignet als dritte Schicht	✓	✗	✗	✓
Fixierung	✓	✓	✓	✓
Dicke	5 mm	5 mm	1,9 mm	

# Primärverband

**Snögg** erweitert sein Sortiment mit drei Wundauflagen für verschiedene Wundarten, darunter kleine Wunden, stark sezernierende Wunden und Wunden mit Infektionsgefahr. Zur Fixierung der drei primären Wundauflagen eignet sich **Adhesive Foam Bandage** hervorragend.

## — Foam — COMPRESS



### FÖRDMT DIE WUNDHEILUNG

- Steril und saugfähig
- Bietet feuchte Wundheilung
- Weich und flexibel



**REF 510003122**  
10 Stk (10 x 10 cm)

**REF 510003123**  
10 Stk (5 x 5 cm)

## — Superabsorbent — COMPRESS



### FÜR STARK SEZERNIERENDE WUNDEN

- Steril
- Hohe Saugfähigkeit
- Hilft, ein Austreten von Exsudat zu verhindern



**REF 510003124**  
10 Stk (10 x 10 cm)

**REF 510003125**  
10 Stk (10 x 20 cm)

# BactiDefend DRESSING

## REDUZIERT DIE KEIMBELASTUNG UM BIS ZU 99%

- Verwendet Peptide, die das Immunsystem nachahmen
- Bindet und zerstört Bakterien physisch
- Fördert die Wundheilung



**REF 510003786**  
5 Stk (4,5 x 15 cm)



## ÜBERSICHT

	BACTIDEFEND DRESSING	FOAM COMPRESS	SUPERABSORBENT COMPRESS
Leicht sezernierende Wunden	✓	✓	✗
Mäßig sezernierende Wunden	✗	✓	✓
Stark sezernierende Wunden	✗	✗	✓
Wunden mit Infektionsrisiko	✓	✗	✗
Chirurgische Wunden	✓	✓	✓
Bindet und zerstört Bakterien physisch	✓	✗	✗
Feuchte Wundheilung	✓	✓	✗
Steril	✓	✓	✓
Kann auf die gewünschte Größe zugeschnitten werden	✓	✓	✗
Optimal fixiert mit Adhesive Foam Bandage	✓	✓	✓



**snogg**<sup>®</sup>

**ANIMAL CARE**

[www.snogg.com](http://www.snogg.com)

Orkla Wound Care AB (Svetsarvägen 15),  
Box 1336, SE-171 26 Solna, Schweden  
Tel +46 (0)8 590 96325,  
[snogganimal@orkla.com](mailto:snogganimal@orkla.com)

620001362 V.01.2025 DE