

snogg®

ANIMAL CARE



Animal WOUND CARE

ELÄINTEN HAAVANHOITOKONSEPTI



- ✓ Helppo kiinnittää ja poistaa aiheuttamatta eläimelle tarpeetonta stressiä
- ✓ Voidaan käyttää eläimen kehon vaikeasti sidottaviin kohtiin
- ✓ Monikäyttöinen - yhdistele ja räätälöi eläimen ja haavan paranemisvaiheen mukaan
- ✓ Hoitaa ja tukee
- ✓ Uusi ulkoasu sisältää selkeät ohjeet



Eläinten haavanhoitoa vuodesta 1980

*Snögg Animal Care*lla on yli 40 vuoden kokemus eläinten haavanhoidosta. Tuotteet on kehitetty yhteistyössä eläinlääkäreiden ja eläinten haavanhoidon asiantuntijoiden kanssa. Tuotteet on tarkoitettu käytettäväksi eläinten haavojen hoitoon samalla mahdollistaen eläinten parhaimman hyvinvoinnin. Tuotevalikoima kattaa erilaisia sidoksia, jotka on kaikki helppo mukauttaa erilaisiin tarpeisiin ja kehon osiin tarjoten käyttäjälle mahdollisuuden luovuuteen.

Adhesive FOAM BANDAGE

LATEKISON

KUN TARVITSET TUOTTEEN, JOKA TARTTUU HYVIN TURKKIIN

- Toinen puoli liimautuu
- Ihanteellinen
pehmustesiteeksi ja
kiinnittämiseen
- Pehmeä ja joustava




REF 510002410
(Entinen Animal Polster)
9 x 200 cm


REF 510002412
(Entinen Animal Polster)
14 x 200 cm

REF 510002413
(Entinen Animal Polster)
22 x 200 cm


Haavojen sitominen:

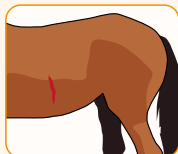

Varmista, että haava on
puhdas ja turkki kuiva.

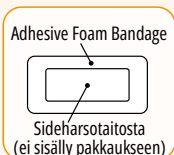

Käytä sideharsotaitosta
(ei sisälly pakkaukseen)
suojataksesi haavaa.

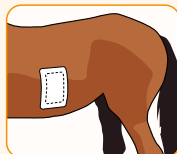

Kiinnitä sideharsotaitos
Adhesive Foam Bandage
-sidoksella.



Skannaa QR-koodi
nähdäksesi
yksityiskohtaiset ohjeet.

Adhesive Foam Bandage REMOVAL WIPES

ADHESIVE FOAM BANDAGE -SIDOKSEN HELLÄVARAINEN POISTAMINEN

- Helpota poistamista
- Helppokäyttöinen
ja tehokas
- Alkoholiton



REF 510002378
30 puhdistusliinaa (12 x 18 cm)

Thick & Thin FOAM BANDAGE

LATEKSITON

JOUSTAVUUS, LIIKKUMISVAPAAUS

- Kiinnittyä vain itseensä
- Voidaan asettaa suoraan haavan päälle
- Imukykyinen, pehmeä ja joustava




REF 510002411
(Entinen Animal Vet)
9 x 200 cm

REF 510002379
(Entinen Animal Soft)
6 x 450 cm

Tassun sitominen:



Kierrä yksi pala Thick- tai Thin Foam Bandage -sidoksesta jalan ympärille.

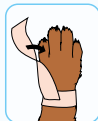

Repäise irti sopivan pituinen pala, joka sopii varpaiden väliin. Kiinnitä se kääreeseen ja käännä sitä 180 astetta.



Liu'uta kapea osa varpaiden välistä ja kiinnitä kääre toiselle puolelle. Toista sama jokaisen varpaan osalta.



Viimeistelet kietomalla toinen sidos jalan ympärille, jotta side pysyy paikallaan.



Skannaa QR-koodi nähdäkseksi yksityiskohtaiset ohjeet.

Flex WRAP BANDAGE

ULOMPI SIDE KIINNITTÄMISEEN

- Helppo ja nopea kiinnittää ja poistaa
- Kiinnittyä itseensä
- Suojaa iältä ja kosteudelta



REF 510002414
5 x 450 cm

REF 510002393
10 x 450 cm



Helpota
Adhesive Foam
Bandage -sidoksen
poistamista
REMOVAL WIPES
-puhdistusliinoilla



YLEISKATSAUS

	ADHESIVE FOAM BANDAGE	THICK FOAM BANDAGE	THIN FOAM BANDAGE	FLEX WRAP BANDAGE
Kiinnitty itseensä – ei tartu turkkiin, ihoon tai haavoihin	✗	✓	✓	✓
Erinomainen kiinnittyvyys turkkiin ja ihoon	✓	✗	✗	✗
Poikittaiselastinen	✓	✓	✓	✗
Pitkittäiselastinen	✗	✓	✓	✓
Imukykyinen	✗	✓	✓	✗
Tyrehdyttää verenvuodon	✗	✓	✓	✗
Kiinnitty märkänäkin	✗	✓	✓	✗
Sopii ensimmäiseksi kerrokseksi	✗	✓	✓	✗
Sopii toiseksi kerrokseksi	✓	✓	✓	✓
Sopii päällimmäiseksi kerrokseksi	✓	✗	✗	✓
Kiinnitys	✓	✓	✓	✓
Paksuus	5 mm	5 mm	1,9 mm	

Ensisijainen haavasidos

Snögg laajentaa valikoimaansa kolmella sidoksella erityyppisiin haavoihin, mukaan lukien pienet haavat, voimakkaasti erittävät haavat ja infektorisikin alaiset haavat. Nämä kolme ensisijaista sidosta kiinnitetään kätevästi **Adhesive Foam Bandage** -sidoksella.

Foam COMPRESS



EDISTÄÄ HAAVAN PARANEMISTA

- Steriili ja imevä
- Tarjoaa kosteuden haavan paranemiselle
- Pehmeä ja joustava



REF 510003122
10 kpl (10 x 10 cm)

REF 510003123
10 kpl (5 x 5 cm)

Superabsorbent COMPRESS



VOIMAKKAASTI ERITTÄVIIN HAAVOIHIN

- Steriili
- Suuri imeytymiskyky
- Auttaa estämään eritteen vuotamista



REF 510003124
10 kpl (10x10 cm)

REF 510003125
10 kpl (10 x 20 cm)

BactiDefend DRESSING

VÄHENTÄÄ BAKTERIKUORMAA JOPA 99%

- Sisältää peptidejä, jotka jäljittelevät immuunijärjestelmää
- Sitoo ja fyysisesti tuhoaa bakteereja
- Edistää haavan paranemista



REF 510003786
5 kpl (4,5 x 15 cm)



YLEISKATSAUS

	BACTIDEFEND DRESSING	FOAM COMPRESS	SUPERABSORBENT COMPRESS
Vähän erittävät haavat	✓	✓	✗
Kohtalaisesti erittävät haavat	✗	✓	✓
Voimakkaasti erittävät haavat	✗	✗	✓
Infektorisikin haavat	✓	✗	✗
Infektorisikin alaiset haavat	✓	✓	✓
Sitoo ja fyysisesti tuhoaa bakteereja	✓	✗	✗
Kostea haavan paraneminen	✓	✓	✗
Steriili	✓	✓	✓
Voidaan leikata haluttuun kokoon	✓	✓	✗
Sopii kiinnitettäväksi Adhesive Foam Bandage -sidoksella	✓	✓	✓



snogg®

ANIMAL CARE

www.snogg.com

Orkla Wound Care AB (Svetsarvägen 15),
Box 1336, SE-171 26 Solna, Sweden
Tel +46 (0)8 590 96325,
snogganimal@orkla.com