

snøgg®

ANIMAL CARE



—Animal— WOUND CARE

TIL BEHANDLING OG STØTTE



Sårpleje til dyr siden 1980

Snøgg Animal Care har mere end 40 års erfaring med sårpleje til dyr. Produkterne er udviklet i samarbejde med dyrlæger og eksperter inden for sårpleje til dyr – med fokus på dyrenes trivsel. Produktsortimentet omfatter forskellige typer forbindinger, der nemt kan tilpasses forskellige behov og områder på kroppen, hvilket giver brugeren valgmulighed og frihed.



Snøgg Animal Care

- ✓ Nem at påføre og fjerne – uden unødigt ubehag for dyret
- ✓ Kan bruges på vanskelige områder af dyrets krop
- ✓ Alsidig anvendelse – kombiner og tilpas til alle dyrearter og stadier af sårhelingsprocessen
- ✓ Kan nemt kombineres med andre sårplejeprocedurer
- ✓ Til behandling og støtte
- ✓ Emballagedesign med klare instruktioner



Hvor kan *Adhesive Foam Bandage* bruges? Få svar på det og meget mere på vores hjemmeside. Scan QR-koden for at komme til Spørgsmål og svar!

Adhesive FOAM BANDAGE

Adhesive Foam Bandage er en elastisk skumforbinding med god vedhæftning på både pels og hud. Forbindingen har en klæbende overflade på den ene side og er særligt velegnet til polstring og fiksering, også på områder, der er vanskelige at bandagere. Produktet kan anvendes alene eller kombineres med kompres og/eller *Thick Foam Bandage* for at skabe en komplet og stabil sårforbinding.



BLØDT OG FLEKSIBELT

- Blødt og fleksibelt
- Klæber på den ene side
- Velegnet til både fiksering og ekstra støtte

TIPS TIL ANVENDELSE

- Fiksering af kompres
- Fiksering af EKG-elektroder
- Ekstra fiksering af bandagering



Når du har brug for god vedhæftning på pels

Adhesive Foam Bandage fås i tre størrelser, der passer til forskellige dyr og sår:



REF 510002410
9 x 200 cm




REF 510002412
14 x 200 cm




REF 510002413
22 x 200 cm


PÅFØR SÅRFORBINDING:

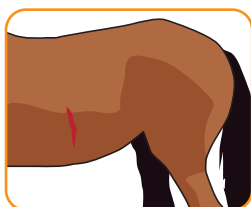

Sørg for, at såret er rent, og at pelsen er tør.

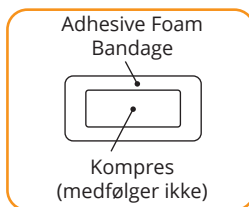


Anvend et passende kompres.

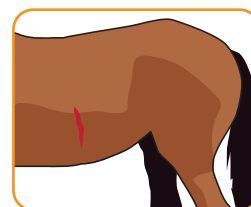

Fastgør kompresset med Adhesive Foam Bandage.


ADHESIVE FOAM BANDAGE SOM SKRIDSIKRING:

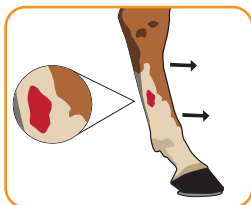

Anvend Adhesive Foam Bandage neden for såret, inden kompres og øvrig bandage anlægges. Adhesive Foam Bandage fungerer som et stop og hjælper med at forhindre, at bandageringen glider ned, især på ben.



LEDINJEKTION I KARPALLEDET:

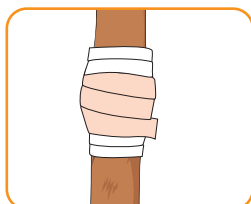

Begynd med at vikle en omgang Adhesive Foam Bandage under knæet. Vikl derefter Thick Foam Bandage over injektionsområdet, så det overlapper Adhesive Foam Bandage. Dette fungerer som et stop og hjælper med at forhindre, at bandageringen glider ned.

Ekstra fiksering: For øget stabilitet kan Adhesive Foam Bandage også påføres oven over bandageringen som et supplerende fikseringstrin. Særligt velegnet på områder med meget bevægelse.

Scan QR-koden for yderligere instruktioner og instruktionsvideoer.



Thick FOAM BANDAGE

Thick Foam Bandage er en selvklæbende skumforbinding, der ikke klæber fast til sår, pels eller hud. Den er fleksibel, giver god bevægelse og er nem at forme. Den absorberende og bløde skumforbinding er ideel til brug på sår, til fastgørelse eller polstring.

REF 510002411
9 x 200 cm



LATEX-FRI



BLØDT OG FLEKSIBELT

- Selvklæbende – klæber kun til sig selv
- Kan placeres direkte på såret
- Absorberende, blød og fleksibel


TIPS TIL ANVENDELSE

- Beskyttelse af overfladiske sår
- Potebandagering
- Bandagering af områder med meget bevægelse
- Beskyttelse ved behandling af svamp




*Fleksibilitet og
bevægelsesfrihed
med Thick Foam
Bandage*


POTEBANDAGERING:

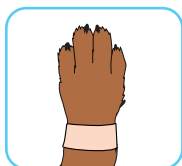


Vikl et stykke Thin Foam Bandage rundt om benet.

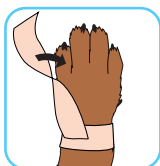

Riv en passende længde af, så den passer mellem tæerne. Fastgør den til omslaget, og drej 180 grader.

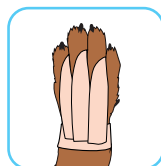


Placer den smalle del mellem tæerne, og fastgør bandagen på den anden side. Gentag for hver tå.

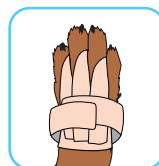


Afslut ved at vikle et andet stykke bandage rundt om benet for at sikre forbindelsen.


BENBANDAGERING:

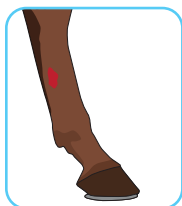

Sørg for, at såret er rent, og at pelsen er tør.

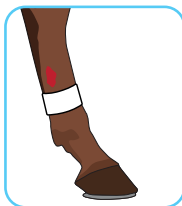

Vikl en omgang Adhesive Foam Bandage under det skadede område til fiksering.

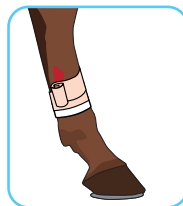

Vikl derefter Thick Foam Bandage over såret i et spiralmønster. Lad bandagen overlape den første forbindelse med 2-3 cm.



Om nødvendigt vikles en ekstra forbindelse udenpå. Den første forbindelse fjernes, når såret er helet.

ØREBANDAGERING:



Form et stykke Thick Foam Bandage til en kegle, og før det ind i øret. Dette beskytter øregangen.



Tag et stykke, som du former til en trekant. Placer den bag øret, på såret eller som støtte til øret ved bandagering.




Klip et stykke Thick Foam Bandage til ca. 4,5 cm i bredden, og vikl det rundt om øret.



Hold bandagen på plads med en bredere strimmel Adhesive Foam Bandage, som fastgøres på og omkring hovedet. Lad øresneglen og det raske øre være ubandagerede.

VED SVAMP:

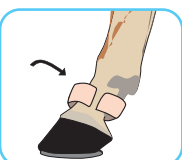

Thick Foam Bandage kan anvendes som et beskyttende lag ved behandling af svamp. Svamp kræver regelmæssig kontrol.

Scan QR-koden for yderligere instruktioner og instruktionsvideoer.



Thin FOAM BANDAGE

LATEX-FRI



Thin Foam Bandage er fleksibel og let at forme. Den tværelastiske forbindelse er selvklebende og klæber ikke fast til sår, pels eller hud. Den er blød, absorberende og kan placeres direkte på såret.

REF 510002379
6 x 450 cm


BLØDT OG FLEKSIBELT

- Selvklebende - klæber kun til sig selv
- Kan placeres direkte på såret
- Absorberende, blød og fleksibel


TIPS TIL ANVENDELSE

- Potebandage
- Yverbandage
- Halebandagering
- Beskyttelse af små overfladiske sår


POTEBANDASJERING:

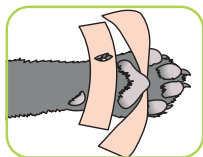


Placer en længde af forbindingen mellem tærne og trædepudden. Skær en slids i forbindingen, og læg den rundt om ulvekloen.

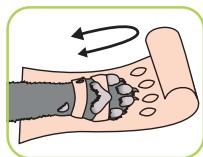

Afriv en passende længde af forbindingen. Lav slidser til klørne.

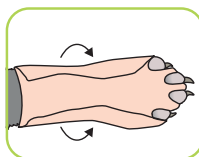

Før klørne gennem slidserne, og fold forbindingen som vist på billedet.

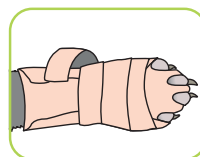



Vikl om nødvendigt en ekstra længde forbindelse rundt om poten for at sikre, at forbindingen sidder korrekt.



Scan QR-koden for yderligere instruktioner og instruktionsvideoer.



YVERBANDAGE:

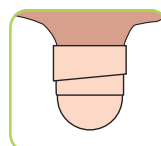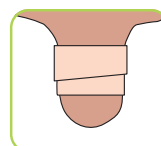

Brug Thin Foam Bandage ved skader på yver og patter.

Skann QR-koden for
ytterligere instruksjoner
og instruksjonsvideoer

*Elastisk og selvklæbende
Thin Foam Bandage*

Primærbandage

Snøgg Animal Care tilbyder to typer forbindinger til forskellige typer sår, herunder små sår og kraftigt væskende sår. Forbindingerne fungerer fremragende i kombination med øvrige sårplejeprodukter og fastgøres bedst med hjælp af *Adhesive Foam Bandage*.

Foam COMPRESS



FREMMER SÅRHEALING

Et sterilt og absorberende skumkompres, der holder såret fugtigt og fremmer sårheling. En blød og fleksibel bandage, der følger kroppens bevægelser. Den klæber ikke til såret og kan klippes til ønsket størrelse.

- Steril og absorberende
- Giver fugtig sårheling
- Blød og fleksibel



REF 510003122
10 stk. (10 x 10 cm)

Superabsorbent COMPRESS



TIL KRAFTIGT VÆSKENDE SÅR

Et sterilt kompres med høj absorptionskapacitet til kraftigt væskende sår. Den interne superabsorberende kerne kan absorbere store mængder væske. Væsken forbliver låst inde i kompresset for at forhindre lækage gennem bandagen.

- Steril
- Høj absorptionskapacitet
- Hjælper til at forhindre lækage af væske



REF 510003124
10 stk. (10 x 10 cm)

Produktoversigt



	ADHESIVE FOAM BANDAGE	THICK FOAM BANDAGE	THIN FOAM BANDAGE
Selvklæbende – klæber ikke til pels, hud eller sår	✗	✓	✓
God vedhæftning på pels og hud	✓	✗	✗
Tværelastisk	✓	✓	✓
Længdeelastisk	✗	✓	✓
Absorberende	✗	✓	✓
Stopper blødning	✗	✓	✓
Hæfter også når det er vådt	✗	✓	✓
Egnet som første lag	✗	✓	✓
Egnet som andet lag	✓	✓	✓
Egnet som tredje lag	✓	✗	✗
Fastgørelse	✓	✓	✓
Tykkelse	5 mm	5 mm	1,9 mm



	FOAM COMPRESS	SUPERABSORBENT COMPRESS
Let væskende sår	✓	✗
Moderat væskende sår	✓	✓
Kraftigt væskende sår	✗	✓
Kirurgiske sår	✓	✓
Fugtig sårheling	✓	✗
Steril	✓	✓
Kan klippes til ønsket størrelse	✓	✗
Velegnet til at fastgøre med Adhesive Foam Bandage	✓	✓



ANIMAL CARE

Forhandler:

www.snogg.com

Orkla Wound Care AB (Svetsarvägen 15), Box 1336, SE-171 26 Solna, Sverige
Tel +46 (0)8 590 96325, snogganimal@orkla.com, www.snogg.com