

snøgg®

ANIMAL CARE



—Animal— WOUND CARE

FÖR BEHANDLING OCH STÖD



Sårvård för djur sedan 1980

Snögg Animal Care har mer än 40 års erfarenhet av sårvård för djur. Produkterna har utvecklats i samarbete med veterinärer och experter på sårvård och är avsedda för användning på djur – med fokus på djurens välbefinnande. Produktsortimentet omfattar olika typer av förband som enkelt kan anpassas efter olika behov, områden på kroppen och olika typer av sår, vilket ger användaren valmöjlighet och frihet.



Snögg Animal Care

- ✓ Lätt att applicera och ta bort
– utan onödigt obehag för djuret
- ✓ Kan användas på svårhanterliga
områden på djurets kropp
- ✓ Mångsidig användning
– kombinera och anpassa för
alla djurtyper och stadier i
sårläkningsprocessen
- ✓ Kan enkelt kombineras med
andra sårvårdsprocedurer
- ✓ För behandling och stöd
- ✓ Förpackningsdesign med
tydliga instruktioner



Var kan *Adhesive Foam Bandage* användas? Få tips på det och mer på vår hemsida. Skanna QR-koden för att komma till FAQ!

Adhesive FOAM BANDAGE

Adhesive Foam Bandage är ett elastiskt skumförband med god vidhäftning på både päls och hud. Förbandet har adhesiv yta på ena sidan och är särskilt lämpligt för vaddering och fixering, även på svårbandagerade områden.

Produkten kan användas fristående eller kombineras med kompress och/eller **Thick Foam Bandage** för att skapa ett komplett och stabilt sårförband.



MJUKT OCH FLEXIBELT

- Mjukt och flexibelt bandage
- Fäster på ena sidan
- Lämplig för både fixering och extra stöd

TIPS PÅ ANVÄNDNING

- Fixering av kompress
- Fixering av EKG-elektroder
- Extra fixering av bandagering



*När du behöver bra
fäste på päls*

Adhesive Foam Bandage finns i tre storlekar för att passa olika djur och sår:



REF 510002410
9 x 200 cm




REF 510002412
14 x 200 cm




REF 510002413
22 x 200 cm


LÄGGA SÄRFÖRBAND:

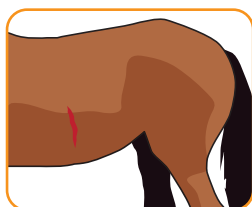

Se till att såret är rent och att pälsen är torr.

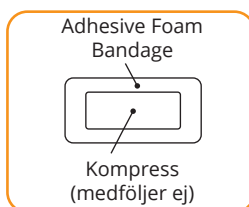


Använd en lämplig kompress.

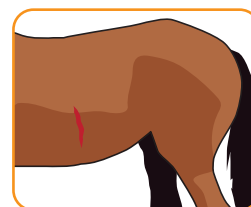

Fixera kompressen med Adhesive Foam Bandage.


ADHESIVE FOAM BANDAGE SOM HALKSKYDD:

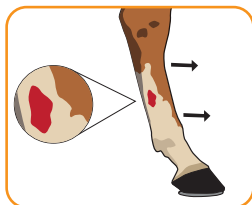

Använd Adhesive Foam Bandage nedanför såret innan kompress och övrigt bandage appliceras. Adhesive Foam Bandage fungerar då som ett stopp och hjälper till att förhindra att bandageringen glider ned, särskilt på ben.



LEDINJEKTION I KARPUS:

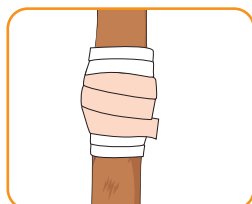

Börja med att linda en bit Adhesive Foam Bandage under knät. Linda sedan Thick Foam Bandage över injektionsområdet och överlappa Adhesive Foam Bandage. Detta fungerar som ett stopp och hjälper till att förhindra att bandageringen glider ned.

Extra fixering: För ökad stabilitet kan Adhesive Foam Bandage även appliceras ovanför bandageringen som ett kompletterande fixeringssteg. Särskilt lämpligt på områden med mycket rörelse.



Skanna QR koden för ytterligare instruktioner och instruktionsfilmer:

Thick FOAM BANDAGE

Thick Foam Bandage är ett självhäftande skumförband som endast fäster i sig självt och därför inte fastnar i sår, päls eller hud. Förbandet är flexibelt, lätt att forma och ger god rörelsefrihet. Det absorberande och mjuka skummet gör Thick Foam Bandage särskilt lämpligt för skydd, vaddering och fixering.

REF 510002411
9 x 200 cm



LATEX-FRI

MJUKT OCH FLEXIBELT

- Självhäftande - fäster endast i sig självt
- Kan placeras direkt på såret
- Absorberande, mjukt och flexibelt


TIPS PÅ ANVÄNDNING

- Skydda ytliga sår
- Tassbandagering
- Bandagering av rörelseutsatta områden
- Skydd vid behandling av mugg




*Flexibilitet och
rörelsefrihet med
Thick Foam Bandage*


TASSBANDAGE:

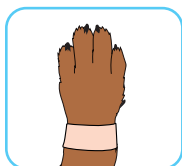


Linda en bit av Thick eller Thin Foam Bandage runt benet.

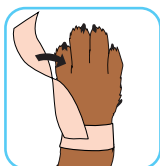

Riv av en lämplig längd så att den passar mellan tårna. Fäst till omslaget och vrid 180 grader.

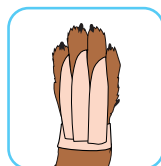


Placera den smala delen mellan tårna och fäst bandaget på andra sidan. Upprepa för varje tå.

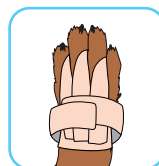


Avsluta genom att linda ett andra bandage runt benet för att säkra förbandet.


BENBANDAGE:

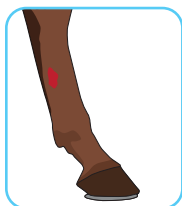

Se till att såret är rent och att pälsen är torr.

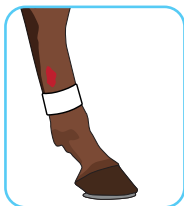

Linda en omgång Adhesive Foam Bandage under det skadade området för fixering.

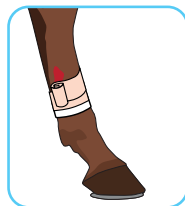

Linda sedan Thick Foam Bandage över såret i ett spiralliknande mönster. Överlappa det första förbandet med 2-3cm.



Byt ut det andra förbandet vid behov. Det första förbandet tas bort när såret är läkt.

ÖRONBANDAGE:



Forma en bit av Thick Foam Bandage till en kon (för att föra in i örat). Detta för att skydda hörselgången.



Ta en till bit som du formar till en triangel. Placera bakom örat, på såret, eller för att ge stöd åt örat vid bandagering.




Klipp en bit Thick Foam Bandage till en 4,5 cm bred remsa och linda runt örat.



Håll bandageringen på plats med en bredare bit av Adhesive Foam Bandage som fäster på hud och päls. Lämna en öppning för hörselgången och lämna det friska örat obandagerat.

VID MUGG:

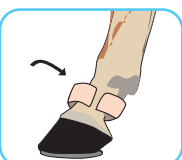

Thick Foam Bandage kan användas som ett skyddande lager vid behandling av mugg. Mugg kräver regelbunden kontroll.

Skanna QR koden för ytterligare instruktioner och instruktionsfilmer:



Thin FOAM BANDAGE

LATEX-FRI



Thin Foam Bandage är flexibelt och lätt att forma. Det tvärelastiska förbandet är självhäftande och klibbar inte fast i sår, päls eller hud. Det är mjukt, absorberande och kan placeras direkt på såret.

REF 510002379

6 x 450 cm


MJUKT OCH FLEXIBELT

- Självhäftande - fäster endast i sig självt
- Kan placeras direkt på såret
- Absorberande, mjukt och flexibelt


TIPS PÅ ANVÄNDNING

- Tassbandage
- Spenbandage
- Bandagering av svans
- Skydd av små ytliga sår


TASSBANDAGE:

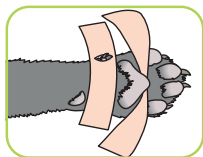


Placera en längd av förbandet mellan tårna och trampdynan. Gör en skära i förbandet och placera det runt sporrén.

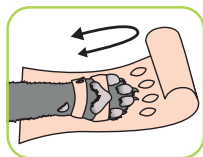

Riv av en passande längd av förbandet. Gör skårar för tårna.

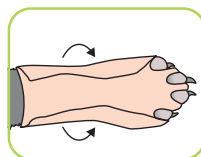

För tårna genom skårorna och vik förbandet som bilden visar.


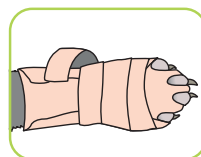


Linda en extra längd av Thin Foam Bandage runt tassén vid behov, för att säkerställa att förbandet sitter ordentligt.



Skanna QR koden för ytterligare instruktioner och instruktionsfilmer.

SPENBANDAGE:

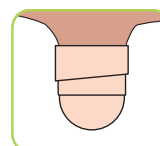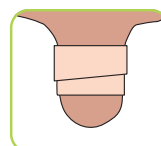

Använd Thin Foam Bandage vid skada på juver och spenar.



Skann QR-koden för
ytterligare instruktioner
och instruktionsvideo

Elastiska och självhäftande Thin Foam Bandage

Primärförband

Snøgg Animal Care erbjuder två sorters förband för olika typer av sår, inklusive mindre sår och kraftigt vätskande sår. Förbanden fungerar utmärkt att kombinera med övriga sårvårdsprodukter och fixeras lämpligen med hjälp av **Adhesive Foam Bandage**.

Foam COMPRESS



FRÄMJAR SÅRLÄKNING

En steril och absorberande skumkompress som håller såret fuktigt och främjar sårhäkning. Ett mjukt och flexibelt förband som följer kropp rörelser. Det fastnar inte i såret och kan klippas till önskad storlek.

- Steril och absorberande
- Skapar fuktig sårhäkning
- Mjuk och flexibel



REF 510003122
10 st (10 x 10 cm)


Superabsorbent COMPRESS



FÖR KRAFTIGT VÄTSKANDE SÅR

En steril kompress med hög absorptionsförmåga för kraftigt vätskande sår. Den inre superabsorberande kärnan kan absorbera stora mängder vätska. Exsudatet stannar kvar i kompressen för att förhindra läckage.

- Steril
- Hög absorptionsförmåga
- Hjälper till att förhindra läckage

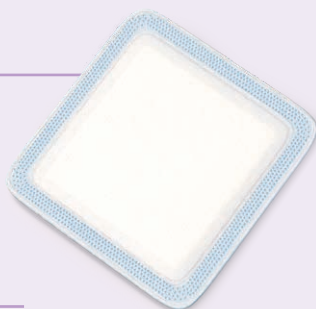

REF 510003124
10 st (10x10 cm)

Produktöversikt



	ADHESIVE FOAM BANDAGE	THICK FOAM BANDAGE	THIN FOAM BANDAGE
Självhäftande – fastnar inte i päls, hud eller sår	✗	✓	✓
Bra fästförmåga på päls och hud	✓	✗	✗
Tvårelastisk	✓	✓	✓
Längdelastisk	✗	✓	✓
Absorberande	✗	✓	✓
Stoppar blödning	✗	✓	✓
Vidhäftande även när det är vått	✗	✓	✓
Lämpligt som första lager	✗	✓	✓
Lämpligt som andra lager	✓	✓	✓
Lämpligt som tredje lager	✓	✗	✗
Fixering	✓	✓	✓
Tjocklek	5 mm	5 mm	1,9 mm



	FOAM COMPRESS	SUPERABSORBENT COMPRESS
Lågt vätskande sår	✓	✗
Medelvätskande sår	✓	✓
Kraftigt vätskande sår	✗	✓
Kirurgiska sår	✓	✓
Fuktig sårsläkning	✓	✗
Steril	✓	✓
Kan klippas till önskad storlek	✓	✗
Lämplig att fixera med Adhesive Foam Bandage	✓	✓



ANIMAL CARE

Återförsäljare:

www.snogg.com

Orkla Wound Care AB (Svetsarvägen 15), Box 1336, SE-171 26 Solna, Sverige
Tel +46 (0)8 590 96325, snogganimal@orkla.com, www.snogg.com