

snogg®

ANIMAL CARE



Animal WOUND CARE

TUOTTEET, JOTKA HOITAVAT JA TUKEVAT



Uudet tuotteet ja paremmat koot

Snögg Animal Care tuo markkinoille uudistetun ja parannellun ulkoasun, jossa on selkeät ohjeet käytön helpottamiseksi. Lisäksi tuotevalikoimaa on laajennettu kahdella uudella tuotteella, joiden tarkoituksena on tarjota entistä kattavampi valikoima eläinten haavojenhoitotuotteita.



Mihin *Adhesive Foam Bandage* -sidosta voidaan käyttää?

Löydät vastauksen tähän ja moneen muuhun kotisivuiltamme. Pääset FAQ-osioon skannaamalla QR-koodin.

Uutuus



Snögg laajentaa valikoimaansa kolmella sidoksella erityyppisiin haavoihin, mukaan lukien pienet haavat, voimakkaasti erittävät haavat ja infektiotriskin alaiset haavat. Nämä kolme ensisijaista sidosta kiinnitetään kätevästi ***Adhesive Foam Bandage*** -sidoksella.



- ✓ Helppo kiinnittää ja poistaa aiheuttamatta eläimelle tarpeetonta stressiä
- ✓ Voidaan käyttää eläimen kehon vaikeasti sidottaviin kohtiin
- ✓ Monikäyttöinen – yhdistele ja räätälöi eläimen ja haavan paranemisvaiheen mukaan
- ✓ Helppo yhdistää muihin haavanhoidon toimenpiteisiin
- ✓ Hoitaa ja tukee
- ✓ Uusi ulkoasu sisältää selkeät ohjeet



ENSISIJAINEN HAAVASIDOS

Snögg laajentaa valikoimaansa kolmella uudella ensisijaisella sidoksella, jotka vastaavat haavanhoidon uusiin tarpeisiin. Uudet sidokset on suunniteltu erilaisiin haavatyyppeihin ja -tiloihin: pieniin haavoihin, voimakkaasti erittäviin haavoihin ja infektoriskin alaisiin haavoihin. Ne toimivat hyvin yhdessä muiden haavanhoitotuotteiden kanssa ja ne kiinnittyvät parhaiten **Adhesive Foam Bandage** -sidoksella.

BactiDefend DRESSING

Uutuus

VÄHENTÄÄ BAKTERIKUORMAA JOPA 99%

Steriili hydrogeelisisidos, jossa käytetään immuunijärjestelmää jäljitteleviä peptidejä. Side sitoo ja fyysisesti tuhoaa bakteereja aiheuttamatta aineiden vuotamista. Side edistää myös haavan paranemista tarjoamalla kostean ympäristön. Turvallinen ja biokompatiivinen. Vain ammattikäyttöön. Käytä kuiviin tai vähän erittäviin haavoihin.

- Sisältää peptidejä, jotka jäljittelevät immuunijärjestelmää
- Sitoo ja fyysisesti tuhoaa bakteereja
- Edistää haavan paranemista



REF 510003786
5 kpl (4,5 x 15 cm)



Foam COMPRESS



EDISTÄÄ HAAVAN PARANEMISTA

Steriili ja imevä vaahtosidos, joka pitää haavan kosteana ja edistää haavan paranemista. Pehmeä ja joustava side, joka mukautuu kehon liikkeisiin. Ei tartu haavaan ja voidaan leikata haluttuun kokoon.

- Steriili ja imevä
- Tarjoaa kosteuden haavan paranemiselle
- Pehmeä ja joustava

Uutuus



REF 510003122
10 kpl (10 x 10 cm)

REF 510003123
10 kpl (5 x 5 cm)

Superabsorbent COMPRESS



VOIMAKKAASTI ERITTÄVIIN HAAVOIHIN

Steriili side, jossa on suuri imeytymiskyky voimakkaasti erittäville haavoille. Sisäinen superabsorboiva ydin voi imeä suuren määrän eritteitä. Erite pysyy sidetyynyn sisällä, mikä estää eritteen vuotamisen sidoksen läpi.

- Steriili
- Suuri imeytymiskyky
- Auttaa estämään eritteen vuotamista

Uutuus



REF 510003124
10 kpl (10x10 cm)

REF 510003125
10 kpl (10 x 20 cm)

Adhesive FOAM BANDAGE

Adhesive Foam Bandage on pehmeä joustosidos, joka tarttuu erinomaisesti sekä turkkiin että ihoon. Sidoksen toinen puoli on liimautuva ja se sopii ihanteellisesti haavasidokseksi ja valvontalaitteiden kuten EKG:n kiinnitykseen. Voit luoda helposti haavasiteen käyttämällä *Adhesive Foam Bandage* -sidosta ja sideharsotaitosta tai *Thick Foam Bandage* -sidosta.

LATEK-
SITON

- Pehmeä ja joustava
- Toinen puoli liimautuva
- Voidaan kiinnittää mihin tahansa osaan eläimen kehoa



*Kun tarvitset tuotteen,
joka tarttuu hyvin turkkiin*

Adhesive Foam Bandage -tuotteesta on saatavilla kolme kokoa erilaisia eläimiä ja haavoja varten:



REF 510002410
(Entinen Animal Polster)
9 x 200 cm




REF 510002412
(Entinen Animal Polster)
14 x 200 cm




REF 510002413
(Entinen Animal Polster)
22 x 200 cm


HAAVOJEN SITOMINEN:

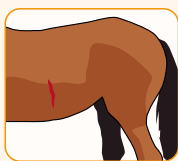

Varmista, että haava on puhdas ja turkki kuiva.

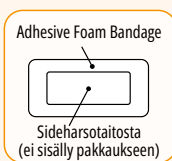

Käytä sideharsotaitosta (ei sisälly pakkaukseen) suojataksesi haavaa.

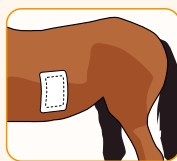

Kiinnitä sideharsotaitos Adhesive Foam Bandage -sidoksella.



Skannaa QR-koodi nähdäksesi yksityiskohtaiset ohjeet.

Adhesive Foam Bandage — REMOVAL WIPES

Removal Wipes -puhdistusliinat tarjoavat helpomman ja hellävaraisemman tavan poistaa liimajäämät eläimen turkista, mikä vähentää epämukavaa tunnetta ja ärsytystä. Alkoholiton koostumus, joka ei kuivata ihoa. Puhdistusliinoja käytetään täydennyksenä **Adhesive Foam Bandage** -sidoksille.

ADHESIVE FOAM BANDAGE -SIDOKSEN HELLÄVARAINEN POISTAMINEN:

- Helpota poistamista
- Helppokäyttöinen ja tehokas
- Alkoholiton

LATEK-
SITON



REF 510002378
30 puhdistusliinaa (12 x 18 cm)

A large, fluffy brown dog, possibly a Weimaraner, is sitting on a grassy field. The dog has long, wavy fur and is looking directly at the camera. Its right front leg is wrapped in a light-colored, thick foam bandage. The background is a soft-focus landscape with green grass, yellow wildflowers, and a body of water under a bright sky.

*Joustavuutta ja liikkumisvapautta
Thick Foam Bandage -sidoksen
ansiosta*

Thick FOAM BANDAGE

Thick Foam Bandage on ainutlaatuinen sidos, joka kiinnittyy itseensä, muttei tartu haavaan, turkkiin tai ihoon. Se on joustava, mahdollistaa hyvän liikkuvuuden ja on helppo muotoilla. Imukykyinen ja pehmeä joustosidos sopii ihanteellisesti käytettäväksi haavojen päällä kiinnitykseen tai pehmustesiteenä.


LATEK-
SITON

- Kiinnittyy vain itseensä
- Voidaan asettaa suoraan haavan päälle
- Imukykyinen, pehmeä ja joustava




REF 510002411
(Entinen Animal Vet)
9 x 200 cm


TASSUN SITOMINEN:

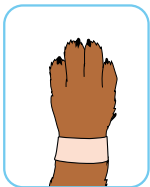


Kierrä yksi pala Thick- tai Thin Foam Bandage -sidoksesta jalan ympärille.

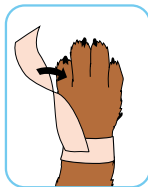

Repäise irti sopivan pituinen pala, joka sopii varpaiden väliin. Kiinnitä se kääreeseen ja käännä sitä 180 astetta.

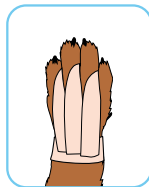

Liu'uta kapea osa varpaiden välistä ja kiinnitä kääre toiselle puolelle. Toista sama jokaisen varpaan osalta.

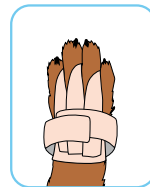

Viimeistelet kietomalla toinen sidos jalan ympärille, jotta side pysyy paikallaan.


JALAN SITOMINEN:



Varmista, että haava on puhdas ja turkki/jalka kuiva.



Kiedo aluksi yksi kerros Adhesive Foam Bandage -sidosta (ei sisälly pakkaukseen) haavakohdan alle siteen kiinnittämistä varten.

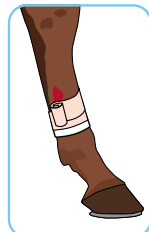

Kiedo sitten Thick Foam Bandage -sidosta haavan ympärille spiraalimaisesti niin, että se on päällekkäin ensimmäisen sidoksen kanssa 2–3 cm.



Vaihda toinen sidos tarvittaessa. Ensimmäinen sidos poistetaan, kun haava on kokonaan parantunut.



Skannaa QR-koodi nähdäksesi yksityiskohtaiset ohjeet.

Thin FOAM BANDAGE

Thin Foam Bandage on helppo muotoilla ja se mahdollistaa erinomaisen joustavuuden. Poikittaiselastinen sidos kiinnittyy itseensä, eikä tartu ihoon, turkkiin tai haavaan. Se on pehmeä ja imukykyinen, ja se voidaan asettaa suoraan haavan päälle.


LATEK-
SITON

- Kiinnittyy vain itseensä
- Voidaan asettaa suoraan haavan päälle
- Monia käyttöalueita, esimerkiksi lehmän vetimet




REF 510002379
(Entinen Animal Soft)
6 x 450 cm


TASSUN SITOMINEN:

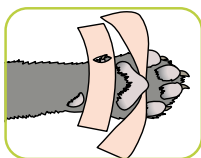


Aseta pala sidosta varpaiden ja haavasidoksen väliin. Tee sidokseen aukko ja aseta se kannuskynnen ympärille.

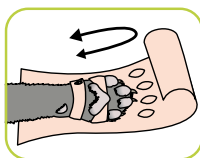

Repäise pala sidoksesta. Tee aukkoja, jotka sopivat varpaiden päälle.

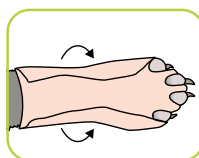

Liu'uta varpaat aukkojen läpi ja taita sidos kuvan osoittamalla tavalla.


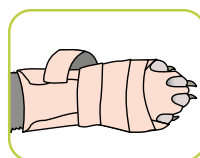


Kiedo tarvittaessa toinen pala sidosta tassun ympärille kiinnittääkseen sidoksen.



Skannaa QR-koodi nähdäksesi yksityiskohtaiset ohjeet.

VETIMEN SITOMINEN:

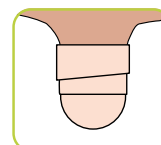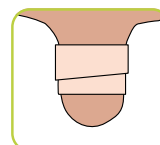

Käytä Thin Foam Bandage -sidosta vedinvaurioiden hoitoon tai vedinkanyyleiden kiinnittämiseen.





*Joustava ja
itsekiinnittyvä
Thin Foam
Bandage*

Flex WRAP BANDAGE

Flex Wrap Bandage on joustava ja venyvä ulompi sidekääre. Se ei tartu ihoon, turkkiin tai haavoihin, ja se sopii ihanteellisesti sideharsotaitosten ja itsekiinnittyvien Foam Bandage -sidosten kiinnittämiseen. Suojaa lialta ja kosteudelta ja sopii useisiin eläimen kehon osiin. Saatavilla kahdessa koossa. Pakattu kätevään pahvipakkaukseen.

- Helppo ja nopea kiinnittää ja poistaa
- Kiinnittyy itseensä
- Suojaa lialta ja kosteudelta



REF 510002414
5 x 450 cm

REF 510002393
10 x 450 cm

Tuotteiden yleiskatsaus

Helpota
Adhesive Foam
Bandage -sidoksen
poistamista
REMOVAL WIPES
-puhdistusliinoilla



	ADHESIVE FOAM BANDAGE	THICK FOAM BANDAGE	THIN FOAM BANDAGE	FLEX WRAP BANDAGE
Kiinnittyy itseensä – ei tartu turkkiin, ihoon tai haavoihin	✗	✓	✓	✓
Erinomainen kiinnittyvyys turkkiin ja ihoon	✓	✗	✗	✗
Poikittaiselastinen	✓	✓	✓	✗
Pitkittäiselastinen	✗	✓	✓	✓
Imukykyinen	✗	✓	✓	✗
Tyrehdyttää verenvuodon	✗	✓	✓	✗
Kiinnittyy märkänäkin	✗	✓	✓	✗
Sopii ensimmäiseksi kerrokseksi	✗	✓	✓	✗
Sopii toiseksi kerrokseksi	✓	✓	✓	✓
Sopii päällimmäiseksi kerrokseksi	✓	✗	✗	✓
Kiinnitys	✓	✓	✓	✓
Paksuus	5 mm	5 mm	1,9 mm	

Uutuus



	BACTIDFEND DRESSING	FOAM COMPRESS	SUPERABSORBENT COMPRESS
Vähän erittävät haavat	✓	✓	✗
Kohtalaisesti erittävät haavat	✗	✓	✓
Voimakkaasti erittävät haavat	✗	✗	✓
Infektioriskin haavat	✓	✗	✗
Infektioriskin alaiset haavat	✓	✓	✓
Sitoo ja fyysisesti tuhoaa bakteereja	✓	✗	✗
Kostea haavan paraneminen	✓	✓	✗
Steriili	✓	✓	✓
Voidaan leikata haluttuun kokoon	✓	✓	✗
Sopii kiinnitettäväksi Adhesive Foam Bandage -sidoksella	✓	✓	✓

www.snogg.com

Orkla Wound Care AB (Svetsarvägen 15), Box 1336, SE-171 26 Solna, Sweden
Tel +46 (0)8 590 96325, snogganimal@orkla.com, www.snogg.com