

**snogg®**

ANIMAL CARE



# Animal WOUND CARE

PARA TRATAMIENTO Y SUJECIÓN





# Cuidando heridas en animales desde 1980

*Snøgg Animal Care* cuenta con más de 40 años de experiencia en el cuidado de heridas de animales. La gama de productos incluye diversos tipos de vendajes y apósitos, todos fácilmente adaptables a diferentes necesidades, zonas del cuerpo y tipos de heridas, ofreciendo al usuario una gran libertad creativa.



¿Dónde se pueden utilizar nuestras vendas *Adhesive Foam Bandage*? Descubra la respuesta y mucho más en nuestra web. Escanee el código QR para acceder a las preguntas más frecuentes.





- ✓ Fácil de poner y quitar – sin estrés innecesario para el animal
- ✓ Puede utilizarse para vendar zonas difíciles en el cuerpo del animal
- ✓ Multiuso – para todo tipo de animales y fases del proceso de cicatrización de heridas
- ✓ Puede combinarse fácilmente con otros procedimientos de cuidado de heridas
- ✓ Para tratamiento y sujeción
- ✓ Diseño del paquete con instrucciones claras



# Apósito primario

*Snögg Animal Care* ofrece tres tipos de apósitos para distintos tipos de heridas, incluidas heridas pequeñas, heridas con fuerte exudado y heridas con riesgo de infección. Funcionan muy bien en combinación con otros productos para el cuidado de heridas y son adecuados para fijarse con el vendaje *Adhesive Foam Bandage*.

## BactiDefend DRESSING

### REDUCE LA CARGA BACTERIANA HASTA UN 99%

Un apósito de hidrogel estéril que utiliza péptidos que imitan el sistema inmunológico. El apósito se une y destruye físicamente las bacterias sin que se filtren sustancias. Además, promueve la cicatrización de la herida al proporcionar un entorno húmedo, seguro y biocompatible. Solo para uso profesional. Úselo en heridas secas o con poco exudado.

- Utiliza péptidos que imitan el sistema inmunológico
- Une y destruye físicamente las bacterias
- Favorece la cicatrización de las heridas



**REF 510003786**  
5 unidades (4,5 x 15 cm)



# Foam COMPRESS



## PROMUEVE LA CICATRIZACIÓN DE LA HERIDA

Un apósito de espuma estéril y absorbente que mantiene la herida húmeda y promueve la cicatrización de la herida. Un apósito suave y flexible que sigue los movimientos del cuerpo. No se adhiere a la herida y se puede cortar al tamaño deseado.

- Estéril y absorbente
- Proporciona cicatrización de la herida húmeda
- Suave y flexible



REF 510003122  
10 unidades (10 x 10 cm)

REF 510003123  
10 unidades (5 x 5 cm)

# Superabsorbent COMPRESS



## PARA HERIDAS CON ABUNDANTE EXUDADO

Un apósito estéril con alta capacidad de absorción para heridas con abundante exudado. El núcleo interno súper absorbente puede absorber una gran cantidad de exudado. El exudado queda atrapado dentro del apósito para ayudar a prevenir la filtración a través de este.

- Estéril
- Alta capacidad de absorción
- Ayuda a prevenir la filtración del exudado



REF 510003124  
10 unidades (10x10 cm)

REF 510003125  
10 unidades (10 x 20 cm)

# Adhesive FOAM BANDAGE

*Adhesive Foam Bandage* es una venda elástica de espuma con gran adherencia tanto al pelaje como a la piel. La venda tiene adhesivo en una cara, lo que permite su aplicación en cualquier parte del animal, y es ideal para acolchar y fijar, o para sujetar dispositivos de monitorización, por ejemplo, los electrodos ECG. Podrás crear fácilmente un apósito para heridas combinando *Adhesive Foam Bandage* con una compresa, o con *Thick Foam Bandage*.

SIN  
LÁTEX

- Suave y flexible
- Adherencia en una cara
- Se puede aplicar en cualquier parte del cuerpo del animal



*Cuando se necesite una gran adherencia al pelaje*

## Adhesive Foam Bandage está disponible en 3 tamaños para adaptarse a diferentes animales y heridas:



**REF 510002410**  
9 x 200 cm




**REF 510002412**  
14 x 200 cm




**REF 510002413**  
22 x 200 cm


### PROTECCIÓN DE HERIDAS:

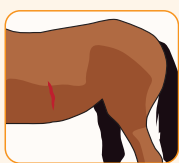

Asegúrate de que la herida está limpia y el pelaje seco.

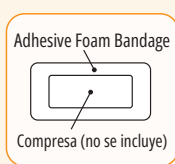

Utiliza una compresa (no se incluye) para proteger la herida.

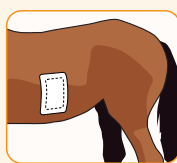

Fija la compresa con Adhesive Foam Bandage.



Escanea el código QR para obtener instrucciones detalladas.

## Adhesive Foam Bandage REMOVAL WIPES

Las toallitas *Removal Wipes* permiten eliminar los restos de adhesivo del pelaje del animal de forma más fácil y suave, lo que reduce molestias e irritación a la hora de retirar vendas adhesivas. Fórmula sin alcohol que no reseca la piel. Las toallitas son un complemento a *Adhesive Foam Bandages*.

### FACILITAN LA RETIRADA DE ADHESIVE FOAM BANDAGES:

- Fácil de quitar
- Uso sencillo y eficaz
- Fórmula sin alcohol

SIN  
LÁTEX



**REF 510002378**  
30 toallitas (12 x 18 cm)



*Flexibilidad y libertad  
de movimiento con  
Thick Foam Bandage*

# Thick FOAM BANDAGE

**Thick Foam Bandage** es una venda autoadherente única que se pega sobre sí misma pero no a la herida, ni al pelaje, ni la piel. Es flexible, permite una gran movilidad y es fácil de moldear. Es una venda de espuma, absorbente y suave, ideal para usar en heridas para fijar o acolchar.


SIN  
LÁTEX

- Solo se adhiere sobre sí misma
- Se puede colocar directamente sobre la herida
- Absorbente, suave y flexible




REF 510002411  
9 x 200 cm


## VENDAJE DE PATAS:

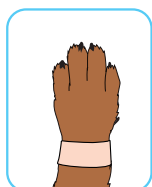


Envuelve la extremidad con un trozo de Thick Foam Bandage o Thin Foam Bandage.

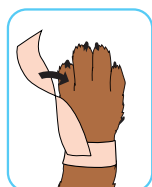

Corta una longitud adecuada para que quepa entre los dedos. Fija en la envoltura y gírala 180 grados.

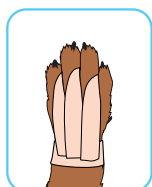

Desliza la parte estrecha entre los dedos y fija la envoltura en el otro lado. Repite para cada dedo.

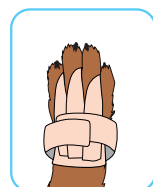

Por último, envuelve la extremidad con una segunda venda para asegurar el vendaje.



Asegúrate de que la herida esté limpia y el pelaje/la extremidad secos.



Enrolla el Adhesive Foam Bandage (no se incluye) debajo de la zona herida para fijar.



A continuación, envuelve la venda Thick Foam Bandage alrededor de la herida en forma de espiral. Solapa al primer vendaje de 2 a 3 cm.



Sustituye el vendaje realizado con Thick Foam Bandage cuando sea necesario. El primer vendaje se retira cuando finaliza la cicatrización.



Escanea el código QR para obtener instrucciones detalladas.

# Thin FOAM BANDAGE

*Thin Foam Bandage* se moldea fácilmente y proporciona amplia flexibilidad. La venda de espuma autoadherente se adhiere sobre sí misma y no a la piel, ni el pelaje, ni la herida. Es suave, absorbente y puede colocarse directamente sobre la herida.


SIN  
LÁTEX

- Solo se adhiere sobre sí misma
- Se puede colocar directamente sobre la herida
- Muchas zonas de uso, p. ej., ubres de vacas




REF 510002379  
6 x 450 cm


## VENDAJE DE PATAS:

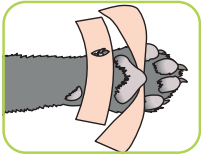


Coloca un trozo de venda entre los dedos y la almohadilla. Haz una ranura en la venda y Colócala alrededor del espolón.

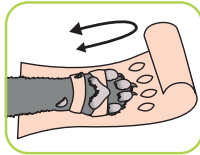

Corta una tira de venda a lo largo. Haz ranuras para que pasen los dedos.

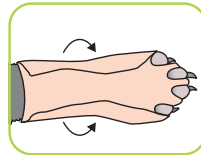

Desliza los dedos por las ranuras y dobla la venda como se muestra.


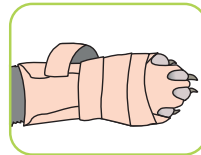


Si fuese necesario, enrolla una tira adicional de venda alrededor de la pata para asegurar el vendaje.



Escanea el código QR para obtener instrucciones detalladas.

## VENDAJE DE UBRES:

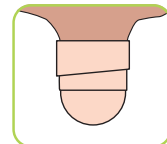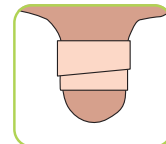

Utiliza Thin Foam Bandage en caso de heridas en ubres o para fijación de tapones pezonera.



*Thin Foam  
Bandage es elástico  
y autoadherente*

## Flex WRAP BANDAGE

*Flex Wrap Bandage* es una venda exterior flexible y elástica. No se adhiere a la piel, al pelaje, ni las heridas, y es ideal para la fijación de compresas y vendajes realizados con Thick/Thin Foam bandage. Protege de la suciedad y la humedad y se adapta a distintas partes del cuerpo del animal. Disponible en 2 tamaños y envasado en un práctico expositor de cartón.

- Fácil y rápida de poner y quitar
- Se adhiere sobre sí misma
- Protege de la suciedad y la humedad



REF 510002414  
5 x 450 cm

REF 510002393  
10 x 450 cm

# Resumen

Facilita la retirada de Adhesive Foam Bandage con las toallitas **REMOVAL WIPES**



	<b>ADHESIVE FOAM BANDAGE</b>	<b>THICK FOAM BANDAGE</b>	<b>THIN FOAM BANDAGE</b>	<b>FLEX WRAP BANDAGE</b>
Se adhiere sobre sí misma - no al pelaje, ni la piel, ni las heridas	✗	✓	✓	✓
Excelente adherencia al pelaje y la piel	✓	✗	✗	✗
Elástico cruzado	✓	✓	✓	✗
Elástico longitudinal	✗	✓	✓	✓
Absorbente	✗	✓	✓	✗
Detiene el sangrado	✗	✓	✓	✗
Adherente incluso en mojado	✗	✓	✓	✗
Adecuado para capas primarias	✗	✓	✓	✗
Adecuado para capas secundarias	✓	✓	✓	✓
Adecuado para capas terciarias	✓	✗	✗	✓
Fijación	✓	✓	✓	✓
Espesor	5 mm	5 mm	1,9 mm	



	<b>BACTIDEFEND DRESSING</b>	<b>FOAM COMPRESS</b>	<b>SUPERABSORBENT COMPRESS</b>
Heridas con poco exudado	✓	✓	✗
Heridas con exudado moderado	✗	✓	✓
Heridas con abundante exudado	✗	✗	✓
Heridas con riesgo de infección	✓	✗	✗
Heridas quirúrgicas	✓	✓	✓
Une y destruye físicamente las bacterias	✓	✗	✗
Cicatrización de la herida húmeda	✓	✓	✗
Estéril	✓	✓	✓
Se puede cortar al tamaño deseado	✓	✓	✗
Adecuadas para la fijación con Adhesive Foam Bandage	✓	✓	✓

[www.snogg.com](http://www.snogg.com)

Orkla Cederroth SAU, Pol. Ind Can Barri, Calle D 08415 Bigues, Barcelona, España  
 Tel: +34 93 865 70 09, [atencionalcliente@orkla.es](mailto:atencionalcliente@orkla.es)  
 Orkla Wound Care AB, Svetsarvägen 15, Box 1336, SE 171 26 Solna, Sweden